

ophtha futur®


sil 1000

sil 2000

sil 5000



Curve of Spectral Transmittance⁽¹⁾

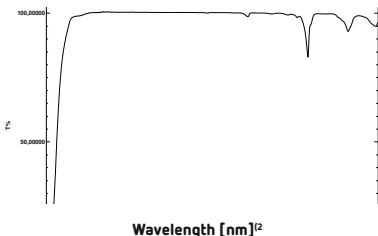

- (1) Curve of Spectral Transmittance | Spektrale Transmissionskurve | Courbe de Transmittance Spectrale | Curva de Transmisión Espectral | Curva di Trasmissione Spettrale | Curve van de Spectrale Doorlaatbaarheid | Křivka Spektrální Propustnosti | Spektrális Áteresztési Görbe | Krzywa Transmitancji Widmowej | Кривая Спектрального Коэффициента Пропускания
- (2) Wavelength | Wellenlänge | Longueur d'onde | Longitud de Onda | Lunghezza d'onda | Golflengte | Vlnová Délka | Hullámhossz | Długość Fali | Длина Волны (нм)



Information as of: | Stand der Information: | Informations en date de: | Información de: | Informazioni valide al: | Informatie per: | Informace ke dni: | A tájékoztató összeállításának időpontja: | Informacja począwszy od: | Информация по состоянию на: 06/2016

NÁVOD K POUŽITÍ

CS

Ophthafutur Sil 1000

Ophthafutur Sil 2000

Ophthafutur Sil 5000

Složení a vlastnosti:

Ophthafutur Sil 1000 / 2000 / 5000: se skládá z ultrapurifikovaného sterilního silikonového oleje (polydimethylsiloxan) o viskozitě 1000 – 1500 / 1700 – 2300 / 5000 – 5900 mPas. Ophthafutur Sil 1000 / 2000 / 5000 je čirý, bezbarvý, bez zápachu a má refrakční index 1,403 – 1,405.

Indikace:

Ophthafutur Sil 1000 / 2000 / 5000 se používá jako oční endotamponáda u těžkých případů odchlípení sítnice například s proliferativní vitreoretinopatií, traumatického odchlípení sítnice, obrovských trhlin v sítnici a dalších odchlípení sliznice, jež nelze léčit jinou formou.


Použití silikonového oleje v případech centrálních trhlin s odchlípením nebo v případech těžkých diabetických retinopatií je v současné době předmětem diskusí.

Aplikace a dávkování:

Pokud bude stříkačka vyprázdněna manuálně, je nutné píst (1) vložený do sterilního sáčku našroubovat do koncovky stříkačky. Plastovou patici (2), která je součástí sterilního balení, lze nasadit na patici stříkačky, což usnadní manuální vyprázdnění. Je-li pro silikonový olej použit injekční systém, je nutné zajistit správné sestavení podle návodu k použití sady hadiček a použitého injekčního systému.

Umístěte stříkačku špičkou nahoru, aby bylo možné ze stříkačky odstranit případný vzduch. Odstraňte ze stříkačky uzávěr opatrným pootočením a upevněte na adaptér stříkačky (Luer Lock) potřebnou kanylu (3). Teprve nyní se zcela vytlačí vzduchové bublinky. Pomalu začněte injekčně aplikovat silikonový olej. Je nutné bezpodmínečně zajistit pevné ukotvení použitého systému hadiček na adaptéru Luer Lock stříkačky. V případě potřeby použijte fixační pomůcky. Stupnice na štítku je dávkování pomoc.

Za výběr pacientů, pracovních metod, dávky a délku endotamponády zodpovídá pouze oční chirurg.

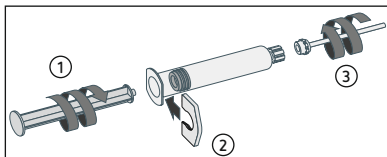

Kontraindikace:

Ophthafutur Sil 1000 / 2000 / 5000 se nesmí aplikovat po implantaci silikonových nitroočních čoček.

Varování a zvláštní upozornění:

Přípravek smějí používat pouze lékaři, kteří mají nezbytné znalosti o manipulaci s tímto přípravkem. Ophthafutur Sil 1000 / 2000 / 5000 je určen pouze pro chirurgický zákrok v zadním segmentu oka. Nepoužívejte Ophthafutur Sil 1000 / 2000 / 5000 opakovaně ani jej opakovaně nesterilizujte.

Použití nesterilního nebo resterilizovaného silikonového oleje nebo vícečetné použití stříkačky může vést ke zkřížené kontaminaci nebo závažnému poškození zdraví pacienta. Datum expirace je založeno na dále uvedených skladovacích podmínkách. Nepoužívejte sterilní balení, které je otevřeno nebo poškozeno. Nepřepĺňujte zadní segment přípravkem Ophthafutur Sil 1000 / 2000 / 5000. Byl hlášen vznik dekompenzace rohovky, katarakty a sekundárního glaukomu. Též byl pozorován vznik emulzifikace se značným poklesem zrakové ostrosti. Klinické zkušenosti ukazují, že silikonový olej má být při stabilizaci onemocnění nebo opakujících se komplikacích odstraněn. Během kombinované aplikace tekutých perfluorouhlovodíků (PFCL) a silikonového oleje byla popsána emulzifikace. Proto je nutné před injekční aplikací silikonového oleje z oka odstranit PFCL. Po odstranění silikonového oleje v pooperační fázi, během níž se zraková ostrost nezvyšuje ani dále nesnižuje, se mohou konečné operační výsledky zlepšit.

Skladování:

Ophthafutur Sil 1000 / 2000 / 5000 je nutné uchovávat při pokojové teplotě (skladujte v suchu při teplotě 4 °C – 25 °C) a chránit jej před světlem a mrazem.

Dodání a sterilizace:

Ophthafutur Sil 1000 / 2000 / 5000 se dovává STERILNÍ ve skleněné stříkačce s obsahem 10 mL. Sterilizace přípravku: sterilizace suchým teplem. Vnější sterilizace: sterilizace párou.

Výrobce:

Pharmpur GmbH
Messerschmitttring 33
D-86343 Königsbrunn
Německo
Telefon: +49 8231 9577-0
Fax: +49 8231 9577-22
E-mail: info@pharmpur.de
www.pharmpur.de

Pharmpur GmbH

Messerschmittring 33
D-86343 Königsbrunn
Germany

Phone: +49 8231 9577-0
Fax: +49 8231 9577-22

Mail: info@pharmpur.de
www.pharmpur.de

0508d-1