


ophtha futur<sup>®</sup>

**deca**

**octa**



## Curve of Spectral Transmittance<sup>(1)</sup>

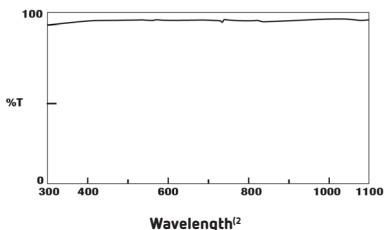

- (1) Curve of Spectral Transmittance | Spektrale Transmissionskurve | Courbe de Transmittance Spectrale | Curva de Transmisión Espectral | Curva di Trasmittanza Spetttrale | Curve van de Spectrale Doorlaatbaarheid | Křivka Spektrální Propustnosti | Spektrális Áteresztési Görbe | Krzywa Transmittancji Widmowej | Кривая Спектрально-го Коэффициента Пропускания | Curva de transmitância espectral | Đường truyền tần số phổ | منحنى النفاذية الطيفية
- (2) Wavelength | Wellenlänge | Longueur d'onde | Longitud de Onda | Lunghezza d'onda | Golflengte | Vlnová Délka | Hullámhossz | Długość Fali | Длина Волны (нм) | Comprimento de onda | Độ dài bước sóng | الطول الموجي



Information as of: | Stand der Information: | Informations en date de : | Información de: | Informazioni valide al: | Informatie per: | Informace ke dni: | A tájékoztató összeállításának időpontja: | Informacja począwszy od: | Информация по состоянию на: | Informação atualizada em: | Tình trạng thông tin: | المعلومات اعتبارًا من: 06/2016

**Ophthafutur Deca****Ophthafutur Octa****Composição e características:**

Ophthafutur Deca: Perfluorocarboneto 100 % fluorado contendo isômeros de perfluorodecalina (95–100 %), perfluorociclohexilbutano e perfluoro-hidrindano. Ophthafutur Deca é um fluido transparente de alta densidade (1,93 g/cm<sup>3</sup>) com um índice de refração de 1,31.

Ophthafutur Octa: Perfluorocarbono 100 % fluorado contendo isômeros de perfluorooctano (> 95 %), perfluoro-heptano e perfluorononano. Ophthafutur Octa é um fluido transparente de alta densidade (1,77 g/cm<sup>3</sup>) com um índice de refração de 1,27.

Ophthafutur Deca e Ophthafutur Octa são não tóxicos devido à fluoretação a 100 %, o que resulta na ausência total de estruturas C-H. É livre de conservantes, quimicamente inerte e não se decompõe no olho.

**Indicações:**

Ajuda cirúrgica

- para desdobrar e reposicionar a retina em casos de descolamento da retina/PVR/PDR, rasgos gigantes, traumatismos oculares
- para coagulação a laser e crioterapia
- para levantar lentes subluxadas e corpos estranhos da cavidade vítrea

**Administração e dosagem:**

A extensão da vitrectomia e a dose necessária de Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa variam em cada caso específico e devem ser determinadas intraoperatoriamente pelo cirurgião oftalmológico. Corpos estranhos e lentes subluxadas podem ser sublavados com Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa após a vitrectomia e, em seguida, elevados ao nível pupilar pelo perfluorocarbono, onde podem ser removidos com segurança. O Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa deve ser completamente removido por aspiração no final da operação. A escala na etiqueta da seringa é um auxílio para a dosagem.

**Contraindicações:**

Não há contraindicações conhecidas.

**Reações adversas:**

Não se pode excluir que, devido à sua elevada gravidade e baixa viscosidade, o Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa possa gerar alterações na retina se permanecer presente durante um longo período de tempo. Deve-se tomar cuidado para evitar qualquer penetração sub-retiniana do produto.

**Interações:**

Se estiver prevista uma endotamponada ocular com óleo de silicone subsequente, o Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa deve ser removido antes da instilação do óleo de silicone, da forma mais completa possível, para evitar alterações do óleo de silicone. Não são conhecidas outras interações.

**Avisos e precauções:**

Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa

- é apenas para uso intraocular
- não deve ser reutilizado
- não deve ser reesterilizado

A esterilidade do produto só é garantida se a embalagem estiver fechada e sem danos. O produto não deve ser utilizado após a data de validade. O produto aberto não deve ser guardado para uso posterior. O uso de perfluorocarbonetos não esterilizados ou reesterilizados ou o uso múltiplo de um frasco/seringa pode levar à contaminação cruzada ou a graves danos à saúde do paciente. A cavidade vítrea não deve ser preenchida em excesso com Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa. Antes de desdobrar a retina com Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa, toda a tração na retina deve ser afrouxada para que o peso adicional do perfluorocarbono não induza descolamento iatrogénico da retina ou fissuras na retina. A tampa de borracha do frasco não é um septo. Não existem dados clínicos específicos sobre os resultados da influência a longo prazo dos perfluorocarbonetos pesados na retina humana. Portanto, o Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa deve ser completamente removido por aspiração no final da operação, uma vez que não se pode excluir a necrose dos vasos da retina ou qualquer outro dano à retina devido à alta gravidade específica em combinação com a baixa viscosidade do perfluorocarboneto. Pode-se usar posteriormente gás ou óleo de silicone, caso seja necessário um tamponamento prolongado da retina. Se permanecerem restos de Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa na frente da retina na forma de gotas móveis, podem influenciar a refração e, assim, alterar temporariamente a acuidade visual.

**Armazenamento:**

Armazene o produto à temperatura ambiente (armazene em local seco a 4 °C – 25 °C) e proteja-o da luz solar.

**Apresentação e esterilização:**

Ophthafutur Deca/Ophthafutur Octa é fornecido esterilizado num frasco de vidro e seringa com capacidade para 5/7 mL.

Esterilização do produto: Filtragem estéril. Esterilização externa: Esterilização a vapor.

**Fabricante:**

Pharmpur GmbH

Messerschmitttring 33

86343 Königsbrunn Germany

Telefone: +49 8231 9577-0

Fax: +49 8231 9577-22

Mail: info@pharmpur.de

www.pharmpur.de



**Pharmapur GmbH**

Messerschmittring 33  
86343 Königsbrunn  
Germany

Phone: +49 8231 9577-0

Fax: +49 8231 9577-22

Mail: [info@pharmapur.de](mailto:info@pharmapur.de)  
[www.pharmapur.de](http://www.pharmapur.de)